

Красота –
это многогранность
HyalDew



HyalDew®




HyalDew®

**Любой образ становится
реальностью с HyalDew**

Каждый из нас обладает уникальной красотой. От анатомических контуров лица и текстуры кожи, до личных предпочтений — мы все разные. HyalDew с уважением относится к этим различиям!

Благодаря коллекции филлеров HyalDew Вы найдёте эффективные решения для создания желаемого образа.

Что характеризует качественный филлер?

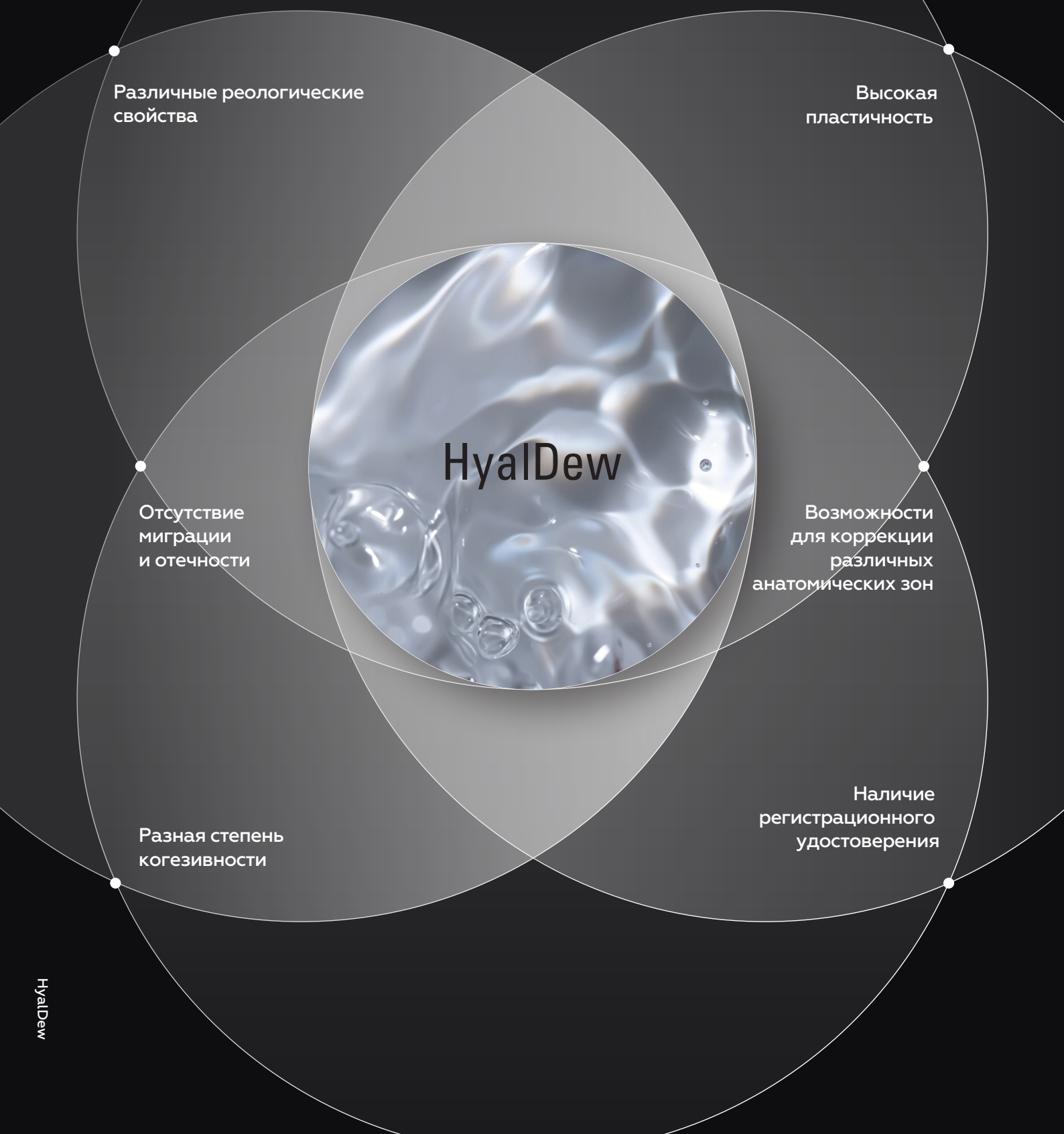


HyalDew — это линия филлеров на основе гиалуроновой кислоты от корейской компании BioPlus Co., Ltd., ведущего производителя в отрасли мировых медицинских биотехнологий.



Благодаря своей инновационной, запатентованной технологии микросфер MDM®, филлеры HyalDew мягко интегрируются в ткани, обеспечивая пролонгированную коррекцию у широкого круга пациентов.

Безопасность и эффективность препаратов HyalDew подтверждены действующим Регистрационным удостоверением Росздравнадзора № РЗН 2023/19791. Филлеры сертифицированы по стандарту CE.


Ньютоны

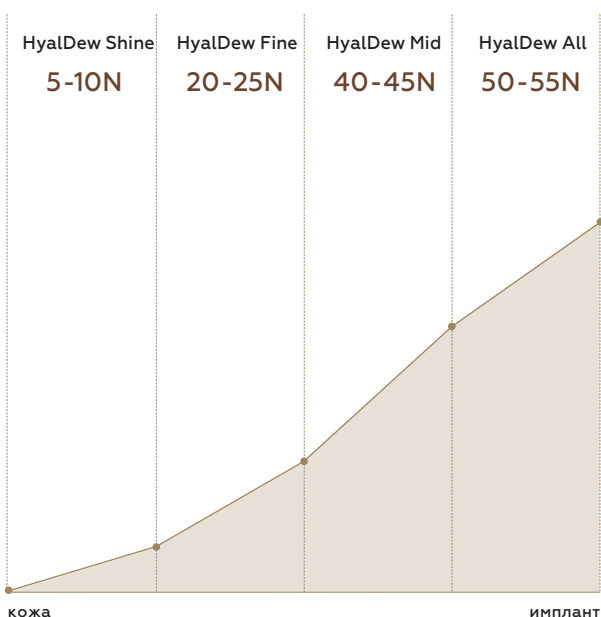


Сила введения | Динамическая вязкость




HyalDew Shine

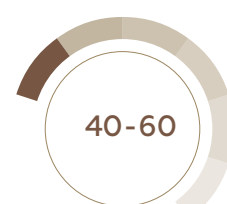

HyalDew Fine

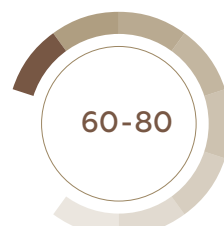

HyalDew Mid

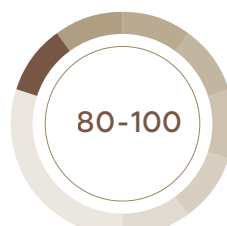

HyalDew All

HyalDew All

Максимально плотный филлер

За счет высокой вязкости препарат стабильно удерживает форму в тканях, обеспечивая стойкий объем и четкую контуризацию

Спецификация

Концентрация ГК	20мг/мл
Объем	1 ml x 1 шприц
Размер частиц	400-500 мкм
Динамическая вязкость	38,0-43,9мПа*с
Молекулярная масса ГК	0.9-1.2 MDa
Рекомендуемые зоны	скулы, носогубные складки, подбородочная область, область нижней челюсти
Игла в комплекте	27G x 13 мм - 2 шт.
Рекомендованные:	
Игла	25G x 13 мм
Канюля	21/22G x 50/70 мм.

Супрапериостально, в проекции глубоких жировых пакетов, субфасциально



HyalDew Mid

Универсальный филлер средней плотности

Эффективно компенсирует умеренно выраженную потерю объема. Благодаря высокой пластичности является оптимальным выбором для создания формы и контура губ.

Спецификация

Концентрация ГК	20мг/мл
Объем	1 ml x 1 шприц
Размер частиц	300~400 мкм
Динамическая вязкость	30,0-37,9 мПа*с
Молекулярная масса ГК	0.9~1.2 MDa
Рекомендуемые зоны	область лба, височная область, скулы, носогубные складки, губы, зона вокруг глаз и губ
Игла в комплекте	27G x 13 мм - 2 шт.
Рекомендованные: Игла Канюля	27G x 13 мм. 22/25G x 50/70 мм.
Субдермально	



HyalDew Fine

Филлер средне-мягкой плотности

Вязкоэластичные характеристики препарата обеспечивают деликатную коррекцию поверхностных морщин и работу с тонкой кожей.

Спецификация

Концентрация ГК	20мг/мл
Объем	1 ml x 1 шприц
Размер частиц	200~300 мкм
Динамическая вязкость	15,0 - 29,9 мПа*с
Молекулярная масса ГК	0.9~1.2 MDa
Рекомендуемые зоны	морщины в области лба, губы, кистетные морщины, "гусиные лапки", носослезная борозда, шея, кисти рук
Игла в комплекте	30G x 13 мм - 2 шт.
Рекомендованные: Игла Канюля	27/29G x 13 мм. 23/25G x 50/70 мм.
Субдермально	



HyalDew®

Превосходство в деталях



Оптимальное решение

Для пациентов с отеочно-деформационным морфотипом старения: осмолярность филлеров HyalDew составляет 280-300 мОсм/л, что соответствует физиологическому диапазону внеклеточной среды. Изоосмотичность гелей нивелирует риски раздражения тканей и образования отеков.

Регулируемая вязкость

Линейка HyalDew включает 4 продукта с различными реологическими характеристиками. Это позволяет решать широкий спектр задач — от мягкой коррекции мелких морщин до создания четких контуров лица.

Стойкость объёма и высокая эластичность

Препараты HyalDew созданы с применением передовой технологии MDM, благодаря которой в коже формируется стабильная и прочная структура. Это обеспечивает длительное сохранение объёма и эластичности, а также предсказуемый и устойчивый эстетический эффект.

Высокая безопасность и биосовместимость

HyalDew обладает высокой биосовместимостью, что гарантирует надёжное и безопасное применение. Продукт сертифицирован Министерством безопасности пищевых продуктов и лекарственных средств Кореи (KFDA) и соответствует европейским стандартам CE, подтверждая высокий уровень контроля качества и безопасности.

HyalDew®

Технология
MDM®

MBMT™


Технология монофазных микрогранул обеспечивает улучшенную/контролируемую вязкоупругость и когезивность

DMCT™

Технология многослойного сшивания на основе дивинилсульфона (DVS) обеспечивает полное связывание молекул без свободных концов реагента.

MDAP™

Многоступенчатая амфифильная очистка позволяет получать высокочистые и безопасные продукты

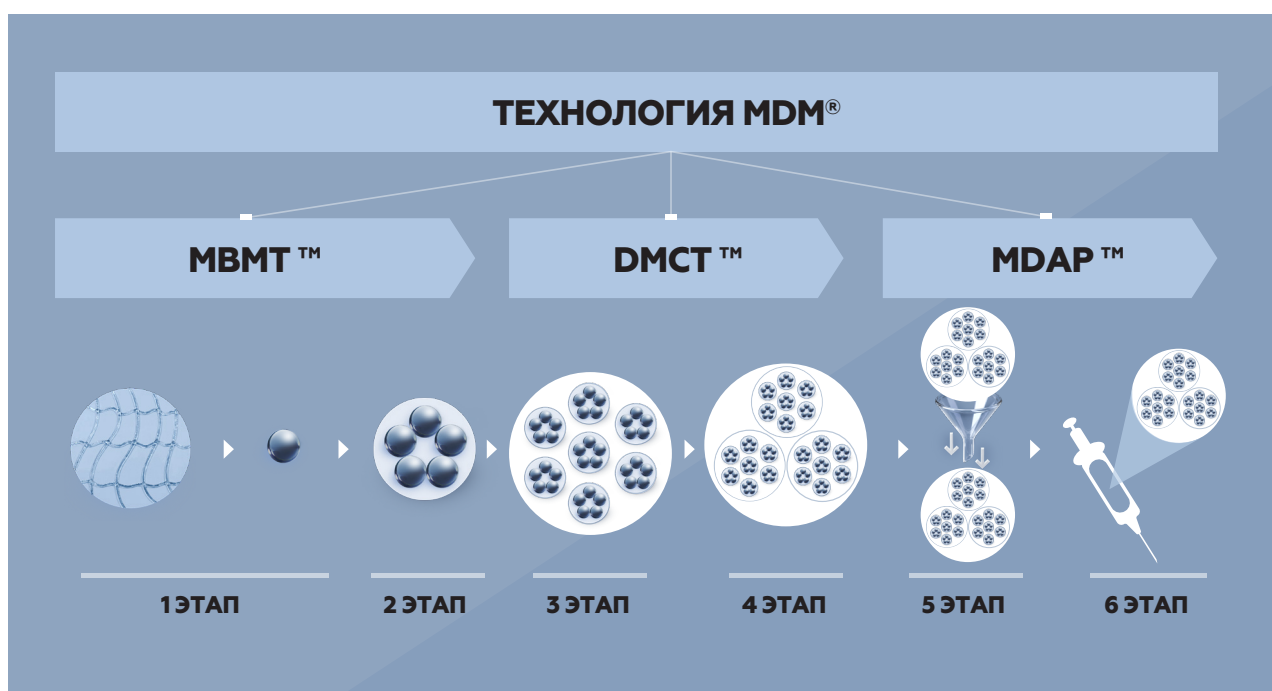

- | | |
|---------------|--|
| 1 ЭТАП | Получение сферы ГК |
| 2 ЭТАП | Сфера, содержащая ГК |
| 3 ЭТАП | Сферы с гранулами ГК объединены с микрогранулами ГК |
| 4 ЭТАП | Последовательное сшивание сфер, содержащих микрогранулы ГК |
| 5 ЭТАП | Финальный процесс очистки от DVS |
| 6 ЭТАП | Заполнение шприцев HyalDew |

HyalDew®

Безопасность без компромиссов,
здоровье и комфорт —
наш главный приоритет


Характеристики ГК одинаковы как в исходном материале, так и в перекрёстносшитой ГК с DVS

TEST ITEM	UNIT	SAMPLE	RESULT	TEST METHOD
Residual solvent : Dimethyl sulfoxide	mg/kg	-	Not Detected (By the client)	


Остатки не
обнаружены,
испытание
завершено



ГК в исходном материале

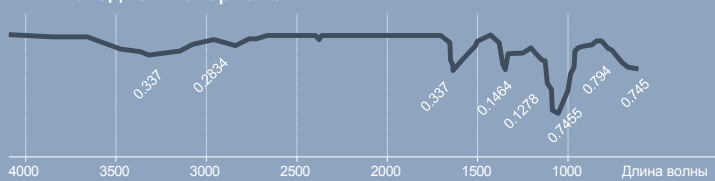


Филлер на основе ГК (готовый продукт)

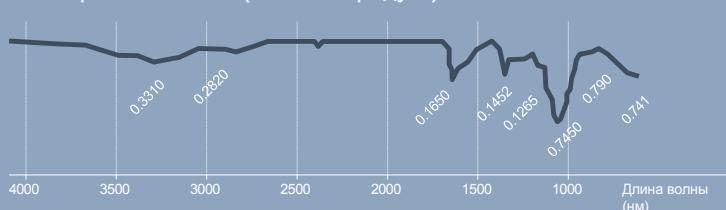

Остатки DVS – обнаружены

Анализ длины волны методом
ИК-спектроскопии с преобразованием Фурье


Исследования для подтверждения вязко-эластичности,
когезивности, технологии перекрёстной сшивки
и удовлетворённости пациентов

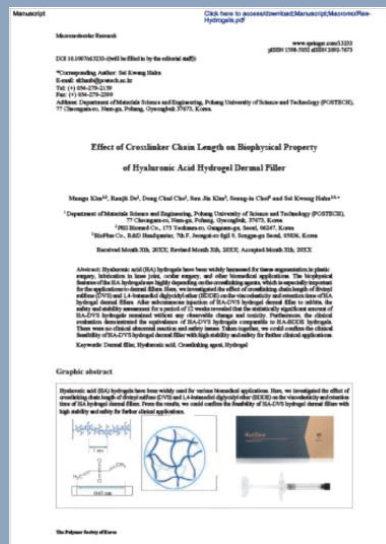


HyalDew®

Безопасность без компромиссов,
здоровье и комфорт —
наш главный приоритет

Исследование стабильности путём теста на отёчность

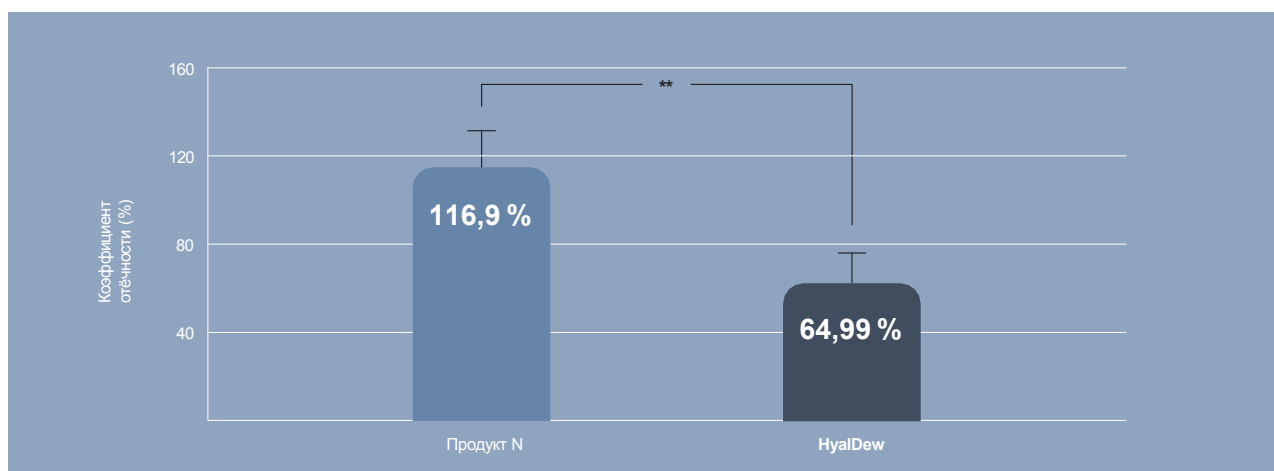

Исследование стабильности путём испытания на гиалуронидазу

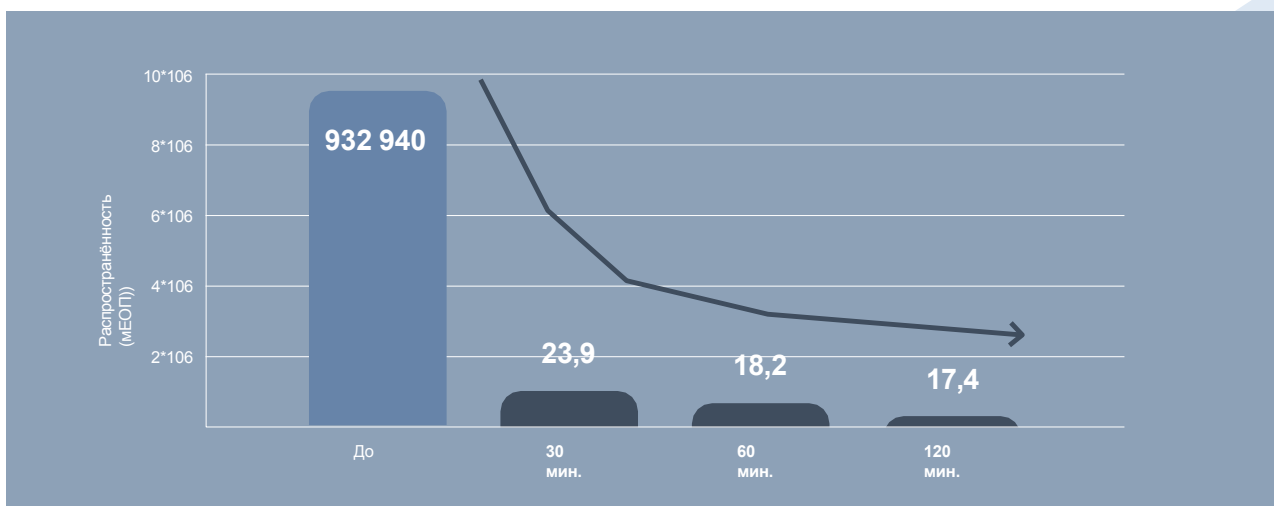

HyalDew — это продукт, на 100% произведённый в Корее, где каждый этап производственного процесса осуществляется в соответствии со строгим контролем качества.

Мы стремимся обеспечивать как удобство для врачей, так и безопасность для пациентов.

HyalDew призван минимизировать возможные побочные эффекты и разработан таким образом, чтобы уменьшать первичный отёк после процедуры и обеспечивать безопасный распад благодаря применению гиалуронидазы. Благодаря доказанной надёжности, HyalDew продаётся более чем в 70 странах мира и был использован более чем 10 миллионов раз, что подтверждает его безопасность и эффективность.



Контактные данные организации

Beauty Vision

Тел.: +7 (495) 198-40-07

E-mail: info@b-vision.ru

Адрес: г. Москва, Ленинский
проспект д. 123, помещение 2/1